

超高感度ラットインスリン測定キット 操作マニュアル

検体5 μ Lで測定する場合

- ・測定は二重測定でおこなってください。
- ・すべての試薬は常温に戻してから使用してください。
- ・標準曲線用インスリン溶液および検体を分注する際、ピペティング容量にばらつきが生じないように注意してください。

1. 洗浄液、インスリン標準溶液の希釈系列及び検体を
取扱説明書の「試薬の調製法」を参考に調製しておきます。

1次反応

2.A 抗体固相化プレートを常温に戻した後、アルミ袋から取り出し、
プレート用フレームにセットします。

3. 各ウェルにG 検体希釈液を95 μ L分注します。



4. 各ウェルに標準曲線用インスリン溶液、または、検体を5 μ Lずつ分注します。
(一次反応の全液量は100 μ L/ウェルとなります。)




5. 付属のプレート用ふたをして、4 で2時間静置して反応させます。

2次反応


6. ウェル内の溶液を完全に除去し、各ウェルあたり300 μ L ずつの洗浄液で5回洗浄します



7. 最後の洗浄でウェル内に残った溶液を完全に除くため、洗浄が終了したら、完全に緩衝液を除去するためにきれいなペーパータオル上でプレートを叩きます。

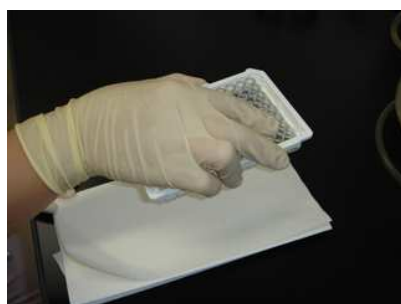


8. 酵素標識抗ラットインスリン抗体溶液（「試薬の調整法」に従い調製したもの）を各ウェルに100 μ L ずつ分注します。

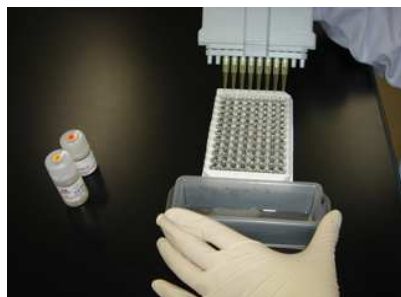


9. プレート用ふたをして常温で30分間静置して反応させます。

酵素反応

10. ウェル内の溶液を完全に除去し、各ウェルあたり300 μ Lずつの洗浄液で7回洗浄し、最後は叩きます。

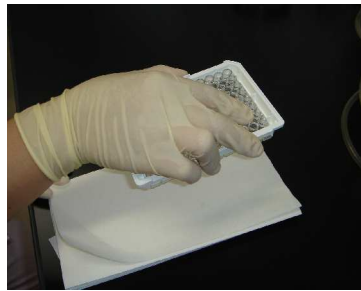


11.E 酵素基質溶液を各ウェルに100 μ Lずつ分注し、遮光下常温で正確に40分間静置して反応させます。

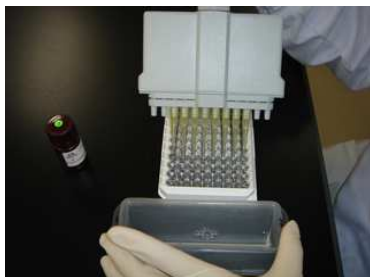

12. F 反応停止液を各ウェルに100 μ Lずつ分注して、酵素反応を停止させます。

* 酵素反応停止後30分以内に吸光度を測定してください。

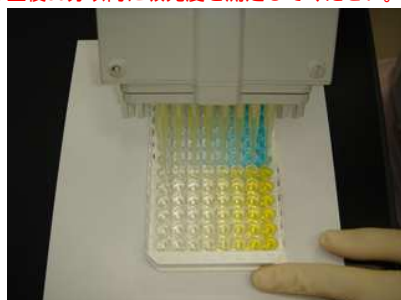

13. プレートリーダーで450nm (副波長630nm) の設定で吸光度を測定します。



23. 標準曲線用インスリン溶液の吸光度より標準曲線を作成し、検体中のインスリン濃度を求めます。

* 詳しくは、取扱説明書の「インスリン濃度の算出法」をご覧ください。

標準曲線例

